


Registre des situations modifiant la disponibilité → Pro-8002

Phares et feux (8)	Détail	25MEC	06MEC	06R	Autre
1- Feux de croisement	Aucun ne fonctionne (8b)			X	Voir croquis ext.
2- Feux de freinage	Aucun ne fonctionne (8b)			X	
3- Gyrophare arrière	Aucun ne fonctionne		X		
4- Gyrophare avant	Aucun ne fonctionne		X		
5- Gyrophares latéraux	Aucun ne fonctionne		X		
6- Feux de position arrière	Aucun ne fonctionne (8b)			X	
7- Feux arrière de changements de directions	Aucun ne fonctionne du même côté (8b)			X	
Éclairage module de soins (8 lampes)	51 % et plus sont non fonctionnel		X		

SECTION 1 : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION



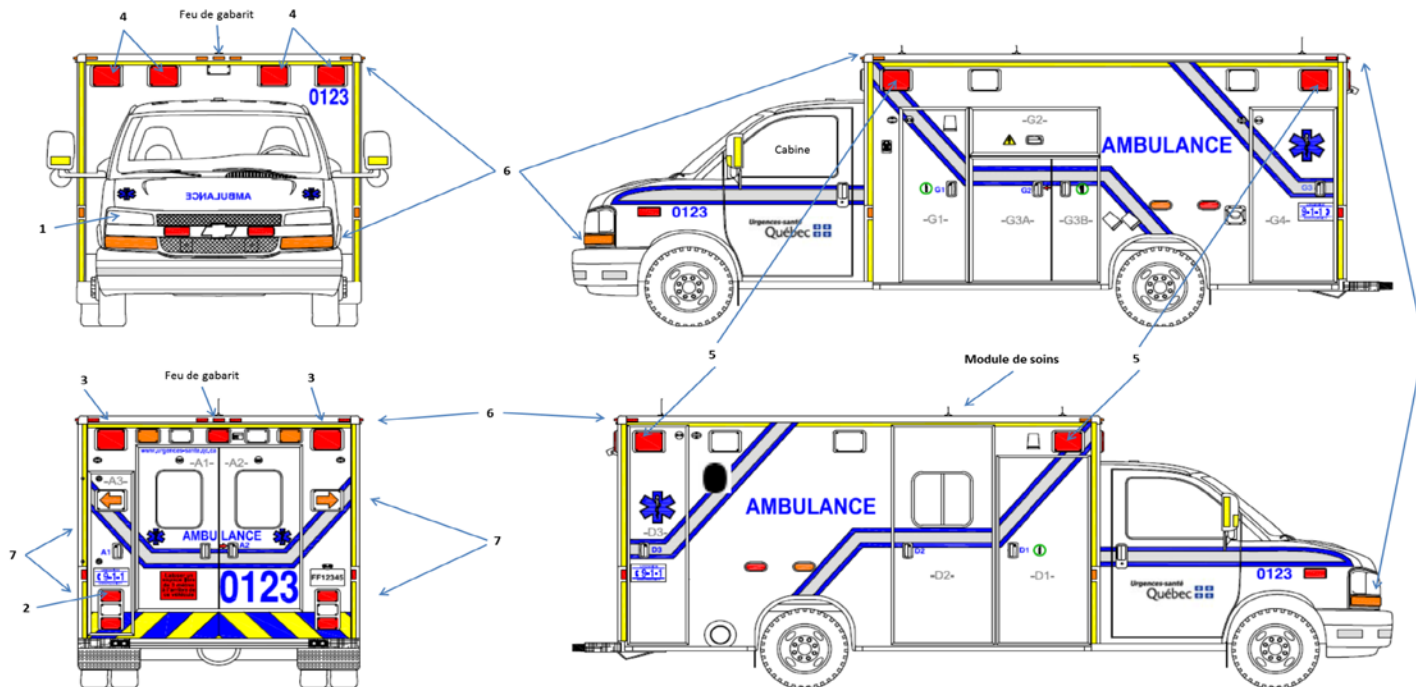


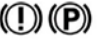







Registre des situations modifiant la disponibilité → Pro-8002

SECTION 2 : DIRECTION ET CAF	DIRECTION (5)	Détail	25MEC	06MEC	06R	Autre
	Servodirection	Servodirection ne fonctionne plus (5b)			X	
	Volant	Le volant est difficile à tourner, bloque ou ne revient pas à sa position d'origine (5b)			X	
	Ancrage ajustable	Le volant se déplace par rapport à sa position normale et il y a risque de séparation (5a)			X	
	CARROSSERIE (2)	Détail	25MEC	06MEC	06R	Autre
	Marchepied arrière	Endommagé et non fonctionnel	X			
	Marchepied latéral, pare-choc	Élément fixe de la carrosserie absent ou mal fixé (2.2)		X	X Si il risque de tomber	Voir croquis int.
	Portières, Porte de compartiments	Portière qui ne se ferme pas de façon sécuritaire (10a)			X	
	Capot	Capot qui ne se ferme pas de façon sécuritaire (2.3)			X	Hors région, contacter GPVE









Registre des situations modifiant la disponibilité → Pro-8002

SECTION 3 : SUSPENSION, COMMANDES, FREINS, PNEUS ET ROUES	SUSPENSION (14)		Détail	25MEC	06MEC	06R	Autre
	Ressorts	Affaissement et/ou déséquilibre du véhicule (14f)				X	
		Bruit de frottement (14e)				X	
		Roue décentrée (14g)				X	
	Commandes conducteur (4)		Détail	25MEC	06MEC	06R	Autre
	Accélérateur	Moteur ne revient pas au ralenti après le relâchement de l'accélérateur (4a)				X	
	Perte de puissance	Baisse de régime (urée - régénérescence)			X		
	Transmission	Ne change pas de rapport ou Glisse de façon excessive (changement de rapport très long)			X		
	Freinage	Il y a absence de freinage ou réduction importante de la capacité de freinage en conduite non urgente (18c)				X	
	Pédale de frein hydraulique	Lorsque le moteur est en marche, la pédale descend toute seule (18.2)			X		
La pédale de frein descend en moins de 10 secondes ou il faut appuyer à plusieurs reprises avant d'avoir une pression (18b)				X			
PNEUS ET ROUES (9 et 12)		Détail	25MEC	06MEC	06R	Autre	
Pneus (9)	Pour un pneu installé sur l'essieu relié à la direction d'un véhicule motorisé ayant un PNBV de 4 500 kg ou plus, la profondeur de deux rainures adjacentes est égale ou inférieure à l'indicateur d'usure (9a)				X		
	Pneu simple ou les pneus jumelés du même assemblage de roues présentent une matière étrangère logée dans la bande de roulement ou le flanc et qui peut causer une crevaison (9b)				X		
	Pneu simple ou les pneus jumelés du même assemblage de roues endommagés au point de voir la toile de renforcement ou la ceinture d'acier (9c)				X		
	Pneu en contact avec une partie fixe du véhicule, qui est à plat ou présente une fuite d'air ou un renflement (9d)				X		
Roues (12)	Pièce de fixation manquante, fissurée, cassée ou mal fixée (12b)				X		
	Roue endommagée ou porte une marque de réparation par soudage (12c)				X		

Registre des situations modifiant la disponibilité → Pro-8002

SECTION 4 : TABLEAU DE BORD, ALIMENTATION ET ÉCHAPPEMENT	TABLEAU DE BORD		Détail	25MEC	06MEC	06R	Autre
	Pictogramme	Couleur					
	Témoin de sac gonflable «AIRBAG»		Rouge ou Jaune Si allumé fixe		X		
	Rappels de ceinture de sécurité		Rouge et fixe	Tous les passagers de la cabine ne portent pas leur ceinture			Rapport en fin de quart
	Système de freinage antiblocage (ABS)		Jaune	Si allumé fixe = Adopter conduite d'un véhicule sans assistance de freinage			Rapport en fin de quart
	Système de freinage		Rouge	Vérification si frein de stationnement retiré			Rapport en fin de quart
	Témoin d'anomalie «Check engine»		Jaune Rouge fixe			X	Rapport en fin de quart
	Pression d'huile		Jaune				Rapport en fin de quart
	Témoin bas niveau Urée Message déroulant explique la situation: - Autonomie restante en Km - Réduction de la vitesse (plus tard)		Jaune		X Peut terminer son appel		Hors Région : Effectuer rapidement le remplissage du Réservoir
	Système de charge		Rouge fixe		X		
	Antivol d'origine		Jaune Fixe	Le véhicule refuse de démarrer			X
	Système de préchauffage moteur		Jaune	Attendre l'extinction lors du démarrage			Rapport en fin de quart
	Température du liquide de moteur		Rouge ou jaune Si allumé fixe	Refroidissement du moteur		X	

Registre des situations modifiant la disponibilité → Pro-8002

SECTION 4 : TABLEAU DE BORD, ALIMENTATION ET ÉCHAPPEMENT	TABLEAU DE BORD		Détail		25MEC	06MEC	06R	Autre	
	Bas niveau de carburant		Jaune			X		Hors Région: effectuer rapidement un remplissage du réservoir	
	Surveillance de la pression des pneus		Jaune (si option présente)	Vérification visuelle des pneus				Si conforme Rapport fin de quart	
	Bas niveau de liquide de lave-glace		Jaune ou bleu (si option présente)					Hors Région: effectuer rapidement un Voir croquis int.	
	Commande électronique de l'accélérateur		Jaune Si allumé fixe						
	Témoin d'anomalie		Rouge fixe	Température moteur ou la pression d'huile est basse			X	Rapport en fin de quart	
	Commande de traction asservie		Jaune (si option présente)	Si allumé fixe Adopter conduite d'un véhicule sans assistance de traction				Rapport en fin de quart	
	Allumé par intermittence = État normal sur chaussée glissante pour informer le conducteur que le système a limité l'accélération								
	Commande de traction asservie éteinte		Jaune (si option présente)	L'interrupteur de la fonction est à 'OFF'				Positionnez à ON	
	Témoin d'anomalie du bouchon de carburant		Jaune (si option présente)	Faire la vérification du bouchon				Rapport en fin de quart	
Carburant	Absence de bouchon (15b)					X			
	Fuite de carburant autre qu'un suintement (15c)					X			
	Eau dans le carburant (water in fuel)				X		10-06 Après l'intervention si applicable		
SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT (16)		Détail		25MEC	06MEC	06R	Autre		
Système d'échappement		Fuite de gaz d'échappement qui s'infiltré dans l'habitacle lorsque le plancher est perforé (16a)				X			

Registre des situations modifiant la disponibilité → Pro-8002

RÉTROVISEUR ET VITRAGE (11)		Détail	25MEC	06MEC	06R	Autre
Pare-brise		Pare-brise ou vitre latérale située d'un côté ou de l'autre du poste de conduite n'offrent pas la visibilité requise au conducteur parce que endommagés (11.1)		X		
Miroir		Rétroviseur extérieur requis par le Code manquant, endommagé ou ne peut être ajusté et demeurer à la position choisie (11.2)		X		
		Rétroviseur extérieur mal fixé ou présente une arête vive (11.3)		X		
DISPOSITIFS		Détail	25MEC	06MEC	06R	Autre
Sièges (13)		Ceinture de sécurité du siège du conducteur manquante, modifiée ou inadéquate (13a)			X	
		Siège du conducteur inadéquat ou ne demeure pas dans la position choisie (13.1)	X			
		Module de soins, Poste de travail principal, bris du mécanisme de retenu.	X	Pas de transport, rapprochement d'un ressource		
Chauffage et air climatisé		Module de soins ne peut maintenir une température moyenne de 20°C, à plus ou moins 5 degrés d'écart (de 15 à 25°C)	X			Voir croquis int.
Dégivrage (3)		Le ventilateur avant ne fonctionne pas (3.1)		X		
Convertisseur		Lors de transport hors région ou assignation interétablissement (si requis), le convertisseur se doit d'être fonctionnel				rapport fin de quart
Lave-glace et essuie-glace (6)		Essuie-glace du côté conducteur manquant ou inadéquat (6a)			X	Si usé ou mal ajusté
		Essuie-glace du côté passager manquant ou inadéquat (6.1)				rapport fin de quart
		Système de lave-glace inefficace (6.2)				rapport fin de quart
Pôle à civière et bloc de rétention		Non fonctionnel ou mal fixé		X		
Sirène, sauf la fonction Rumbler (basse fréquence)		Non fonctionnel		X		Rumbler: Rapport fin de quart
Ventilation de la cabine de soins		Non fonctionnel		X		
Communication		Détail				
Radio portative		Si un des deux portatifs est non fonctionnel		06RAD		
GPS		Le CCS n'est pas en mesure d'obtenir une position du véhicule.	25RAO			
MCAD		L'ordinateur véhiculaire n'établit pas de communication avec la RAO				Rapport fin de quart

Registre des situations modifiant la disponibilité → Pro-8002

SECTION 7 : ÉQUIPEMENT CLINIQUE	Description	Disponibilité partielle 10-25 [25EQ]	Non-disponibilité 10-06 [06EQ]	
	Matériel pour le déplacement du patient			
	Civière à niveau multiple (électro hydraulique) incluant les batteries ou le bris de courroies	P0 P1 en première réponse P2 (incubateur seulement)		
	Système de retenue pédiatrique (Pedimate)	Banc d'auto de l'enfant privilégié		
	Civières chaises	Les 2 non-fonctionnelles		
	Planchette de transport (PDSB)	X		
	Matériel pour immobilisation du patient			
	Planche longue	Deuxième ressource ?		
	Courroie d'immobilisation (fast clip)	X		
	Matelas immobilisateur	X		
Collets cervicaux	X			
K.E.D.	X			
Matériel de base				
Sphygmomanomètre manuel / Brassards	X			
Couverture pour brûlures	Deuxième ressource ?			
Matériel respiratoire				
Cylindre de type M < 500 (fixe dans le véhicule)	X Deuxième ressource ?			
Cylindre de type E (portable)	Deux bonbonnes vides	Trois bonbonnes vides		
Régulateur/manomètre compensé cylindre E	Si <u>un</u> régulateur/manomètre compensé est hors service	Si les <u>2</u> régulateurs/manomètre compensé sont hors service		
Régulateur sans bille (CPAP)	X Peut utiliser celui situé au plafond du module de soins			
Ensemble de tube en T	X			
CPAP	X			
Oxylator	X			

Registre des situations modifiant la disponibilité → Pro-8002

SECTION 7 : ÉQUIPEMENT CLINIQUE

Description	Disponibilité partielle 10-25 [25EQ]	Non-disponibilité 10-06 [06EQ]
Matériel respiratoire (suite ...)		
Canule oesophagotrachéale à double voie (combitube)		X Si 2 de la même grandeur
Ventilateur de position oesophagienne	X	
Détecteur CO2 colorimétrique	X	
Canules oro-pharyngées	Si 2 de la même grandeur	
Canules naso-pharyngées	Si 2 de la même grandeur	
Lunette nasale	X	
Masque oxygène 100% adulte	X	
Masque oxygène 100% pédiatrique	X	
Masque oxygène 100% nourrisson	X	
Masque salbutamol adulte	X	
Masque salbutamol pédiatrique	X	
Masque de poche adulte	X	
Ballon masque adulte	X	
Ballon masque pédiatrique	X	
Ballon masque nourrisson	X	
Masque de ventilation nourrisson	X	
Masque de ventilation petit adulte	X	
Masque de ventilation adulte	X	
Masque de ventilation adulte x-large	X	
Matériel pour la succion		
Succion véhiculaire	X	
Succion portative		X
Tige rigide	X	
Cathéter # 14	X	
Tubulure à succion	X	
Réservoir pour la succion portative		X
Réservoir pour la succion véhiculaire	X	

Registre des situations modifiant la disponibilité → Pro-8002

SECTION 7 : ÉQUIPEMENT CLINIQUE

Description	Disponibilité partielle 10-25 [25EQ]	Non-disponibilité 10-06 [06EQ]
Matériel pour le MDSA		
Moniteur défibrillateur		X
Capteur SPO2 (saturomètre)	X	
Câble de monitoring		X
Câble ECG 12-D		X
Câble de thérapie (défibrillation)		X
Adaptateur pour électrodes de défibrillation		X
Batteries		Si aucune batteries
Électrodes de défibrillation adulte		X
Électrodes de défibrillation pédiatrique	X	
Électrodes de monitoring(adulte seulement)		X
Papier graphique/imprimante		X
Trousse		
Absence d'un médicament		X <ul style="list-style-type: none"> • Glucagon • Aspirine (ASA) • Nitroglycérine (nitro) • Épinéphrine (épi) • Ventolin (Salbutamol)
Glucomètre	X	
Insta-Glucose	X	
Trousse PED/OBS	Manquante Avis à un chef aux opérations de la situation	
Trousse TRAUMA	Manquante Avis à un chef aux opérations de la situation	
Trousse unique		Manquante Avis à un chef aux opérations de la situation

Registre des situations modifiant la disponibilité → Pro-8002

	Description	Disponibilité partielle 10-25 [25EPI]	Non-disponibilité 10-06 [06EPI]
SECTION 8 : SANTÉ SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS	ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE		
	Gants		Cette responsabilité relève du paramédic: Avis au superviseur immédiat par gestionnaire en devoir
	LES AUTRES E.P.I.		
	Masque chirurgical (Protection respiratoire)		Si inférieur à 2 unités (Tyvek de taille supérieure convient comme protection)
	Blouse (protection de contact)		
	Tyvek (Protection de contact)		
	Couvre-bottes (protection de contact)		
	Masque de type N-95		Si inférieur à 2 unités (masque particuliers): Cette responsabilité relève du paramédic - Avis au superviseur immédiat par le gestionnaire en devoir
	Visière	Si inférieure à 2 unités	
	VÊTEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUEL		
	V.P.I. ou bunker	X Avis au coordonnateur du CO désigné	Et avis au supérieur immédiat par le gestionnaire en devoir
	AUTRES SITUATIONS		
Uniforme sale ou souillé	25UNI Si nécessite un changement de la pièce d'uniforme	06UNI Si le paramédic informe qu'il doit prendre une douche au CO	
Contact avec parasite suspecté (paramédic ou ambulance)		06UNI ou 06NET Nettoyage selon le guide avec les produits au CO	
Transport d'un patient ayant une maladie ou infection contagieuse confirmée	25NET (en direction du CO) Aucun transport possible affectez une deuxième ressource	06NET (arrivé au CO) S'il ne peut effectuer le nettoyage avec les produits qu'il a à sa disposition, selon le guide SST	

